


Cihazımla ilk adımlar.

Güç, hortum ve maske bağlantısını adım adım kontrol edin.


Güç kablosunu bağlayın

- 01 Cihazı sağlam, düz ve baş seviyenizden aşağıda bir yüzeye yerleştirin. Hava girişini açık tutun.
- 02 Verilen adaptörün DC fişini sağ ön yandaki yuvarlak girişe yerleştirin.
- 03 Fişe **kablo tarafından bakarken saat yönünde 90°** çevirerek kilitleyin.
- 04 AC güç bağlantısını tamamlayın ve prize takın. Cihaz bekleme ekranında açılır.

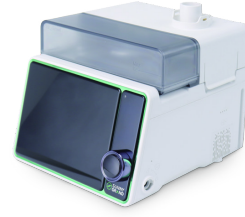

Güç için yuvarlak DC girişini kullanın. Type-C bağlantısı kullanıcı güç girişi değildir. Terapiyi fişi çekerek durdurmayın.

Hortumu ve maskeyi bağlayın

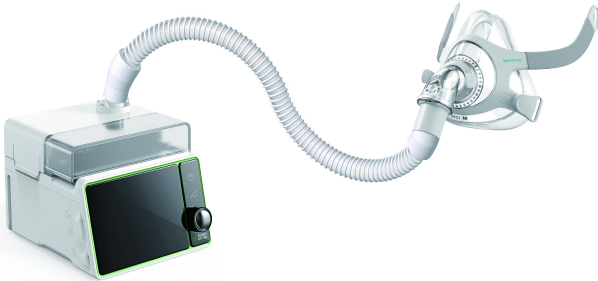

- 01 Hortumun bir ucunu cihazın hava çıkışına, diğerini maskenin hortum bağlantısına takın.
- 02 Maskeyi kendi talimatına göre takın. Hortumun sıkışmadığını kontrol edin.
- 03 **Maskenin hava verme deliklerini kapatmayın.**

Kaynak: CPAP/APAP PDF s. 15, 22, 25–26; Hızlı Başlangıç PDF s. 5. Kilit yönü gerçek cihaz için kullanıcı tarafından doğrulanmıştır; hızlı başlangıç metnindeki ters yön düzeltilmiştir.

Su haznesi ve hava filtresi.

Bakım öncesi terapiyi durdurun, elektrik bağlantısını ayırın.

Boş su haznesini değiştirme

- 01 Başlat/Durdur düğmesine **3 saniye** basarak terapiyi durdurun. Elektrikli ayırın; tablanın soğuması için **15 dakika** bekleyin.
- 02 Kapağın iki yanındaki gizli mandalları dışarı çekin. Kapağı kaldırın.
- 03 **Boş hazneyi** yukarı çıkarın. Temiz, boş hazneyi yerine yerleştirin.
- 04 Hazne yerindeyken **saf su** ekleyin. MAX çizgisini aşmayın.
- 05 Kapağı iki taraftan tık sesi duyulana kadar hafifçe bastırarak kapatın.



Musluk veya maden suyu kullanmayın. Hava çıkışından su doldurmayın. Suyu her gün yenileyin. Bu akış boş hazne değişimini anlatır; cihazı eğerek su boşaltmayın.

Hava filtresini değiştirme




- 01 Sağ yandaki hava girişi kapağını açın.
- 02 Eski filtreyi çıkarın; uyumlu yeni filtreyi kapağın içine yerleştirin.
- 03 Kapağın önce üst tarafını yuvasına geçirin, ardından alt tarafına hafifçe bastırın.

Filtre yıkanmaz. Kılavuzdaki değişim aralığı 3–6 aydır.

Kaynak: CPAP/APAP PDF s. 16, 23–25, 32, 44, 48; Hızlı Başlangıç PDF s. 3–4. Filtre görseli kullanıcı fotoğrafından düzenlenmiştir; teknik resim değildir.


Ekranı tanıyın.

Kılavuz ekranları: model ve yazılım sürümüne göre farklılık olabilir.

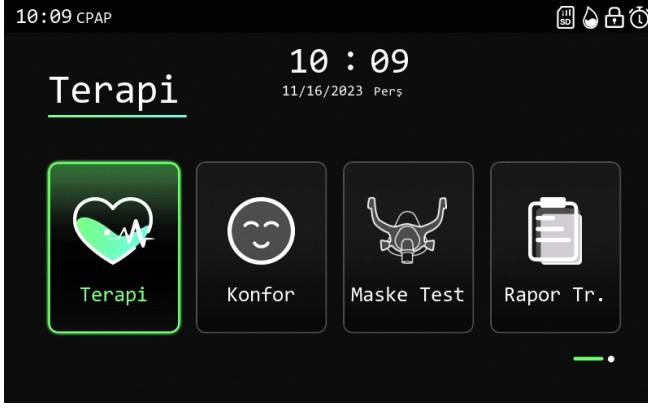


Ana menü

Konfor, Maske Test ve Rapor Tr. buradan açılır. İkinci sayfada Sist. Aya. ve Saat bulunur.

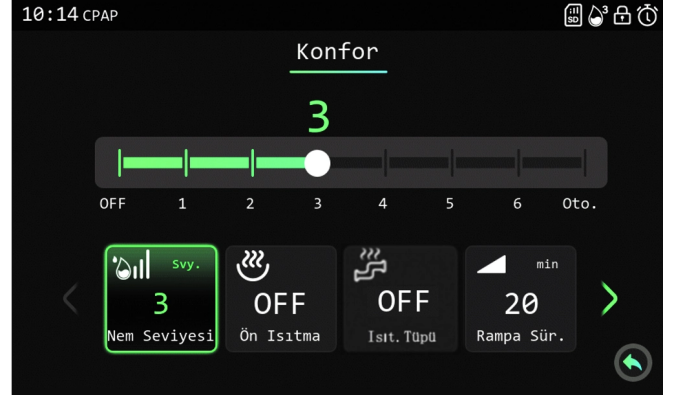

Konfor → Nem Seviyesi

Seçenekler OFF, 1–6 ve Oto. şeklindedir. Ekrandaki 3 değeri bir ayar önerisi değildir.

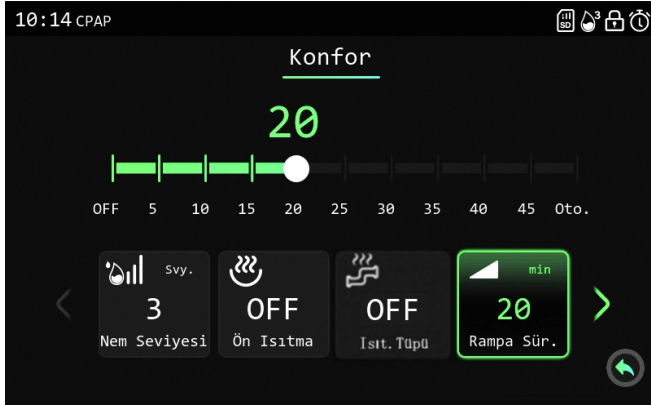

Konfor → Rampa Süresi

OFF, 5–45 dakika ve Oto. seçenekleri vardır. Ekrandaki 20 dakika yalnızca örnektir.



Maske Test

Maskeyi takın, Mask Te. Baş seçin. Kaçak uyarısında maskeyi talimatına göre yeniden yerleştirip testi tekrarlayın.

Başlat/Durdur: başlatmak için kısa basın; durdurmak için 3 saniye basılı tutun. **Tedavi basıncı ve klinik ayarları sağlık uzmanınız belirler.**

Rapor Tr. menüsünde kullanım verileri ve AHI/P95 eğilimleri bulunur. Sonuçlarınızı sağlık uzmanınızla değerlendirin; kendi tedavi basıncınızı değiştirmeyin.

Kaynak: CPAP/APAP PDF s. 23, 27, 30–31, 37–38, 47–50. Görseller gerçek kılavuz ekranlarıdır; değerler örnektir. Etkileşimli eğitim gerçek cihazınıza bağlanmaz.

Günlük küçük kontroller.

Akşam hazırlığından temizlik ve taşımaya, kısa hatırlatmalar.

Akşam kontrolü

- ☐ Cihaz düz, sağlam yüzeyde; hava girişi açık.
- ☐ Haznedeki su yenilendi; MAX çizgisi aşılmadı.
- ☐ Hazne kapağının iki tarafı kapalı; filtre ve kapağı yerinde.
- ☐ Hortum ve maske bağlı; hortum sıkışmıyor.

Temizlik ve bakım

Haznedeki su	Her gün yenileyin. Kullanılmayacaksa hazneyi boş ve kuru tutun.
Gövde	Kullanmadan önce ve sonra, günde en az iki kez; yumuşak, tüy bırakmayan bezle silin.
Su haznesi	Her 7 günde bir nötr deterjanla temizleyin; iyice durulayın ve kurutun.
Hava filtresi	Yıkamayın. 3–6 ayda bir yenisiyle değiştirin.
Maske ve hortum	Kendi üreticilerinin temizlik ve değişim talimatını izleyin.

Temizlikten önce fişi çekin. Kaynar su, aşındırıcı temizleyici, klorlu madde veya aseton kullanmayın. Gövdeyi suya batırmayın; bağlantı yuvalarının içini ıslatmayın. Deterjan kalıntısı bırakmayın.

Taşımadan önce

Hazneyi boşaltıp kurutun. Cihazı içinde su varken taşımayın. Cihaz ve aksesuarlarını taşıma çantasına yerleştirin.

Kaynak: CPAP/APAP PDF s. 16, 25, 32, 44, 52–54. Bu kısa yardımcı rehber, üreticinin tam kullanım kılavuzunun yerine geçmez; klinik ayarlar eğitim kapsamı dışındadır.